


Umbettlaken PROFI

BEXAMED[®] GmbH Hochwertige medizintechnische Produkte für den professionellen Bereich

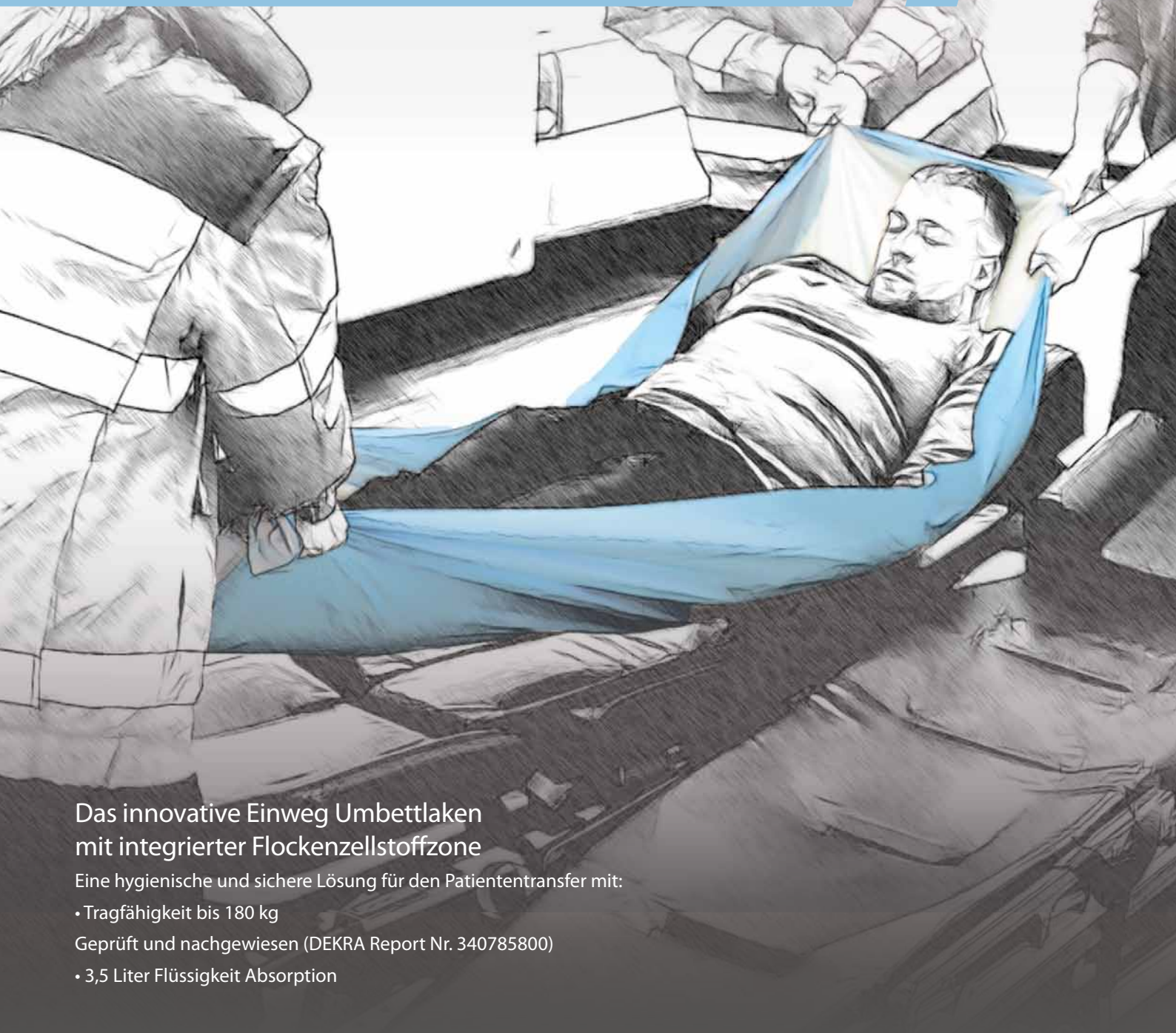

Das innovative Einweg Umbettlaken
mit integrierter Flockenzellstoffzone

Eine hygienische und sichere Lösung für den Patiententransfer mit:

- Tragfähigkeit bis 180 kg
- Geprüft und nachgewiesen (DEKRA Report Nr. 340785800)
- 3,5 Liter Flüssigkeit Absorption

Umbettlaken PROFI

Das innovative Einweg Umbettlaken mit integrierter Flockenzellstoffzone

Eine hygienische und sichere Lösung für den Patiententransfer

Das Umbettlaken PROFI wird angewendet wenn eine Patientenumlagerung mit hygienischer Trageauflage notwendig ist. Durch die integrierte leistungsstarke Saugzone mit einem Aufnahmevolumen von bis zu 3,5 Liter und mit einer Tragfähigkeit bis zu 180 kg wird eine unkomplizierte Umbettung von Patienten auf einer hygienischen Unterlage gewährleistet.

Die Vorteile der Umbettlaken PROFI im Überblick:

- Superstarke Tragfähigkeit bis 180 kg auch nach Absorbierung von 3,5 Liter Flüssigkeit **geprüft und nachgewiesen (DEKRA Report Nr. 340785800)**
- Hohe Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten bis zu 3,5 Liter
- Flüssigkeitsundurchlässig
- Gewährleistung einer hygienischen Arbeitsumgebung in der Notfallambulanz und den OPs
- Minimierung von Cross-Infektion für Patienten und Personal
- Kostenoptimierung durch stark reduzierten Aufwand bei der Reinigung und Wiederaufbereitung von Transportmitteln und im OP
- Vielseitig einsetzbar

Art.-Nr.: V100028
(Verpackungseinheit = 20 Stück)

180 KG TRAGFÄHIGKEIT

3,5 LITER ABSORPTION

EINWEG PRODUKT

ANTI-KONTAMINATION



Produktspezifikation



Haupttuch 220 x 100 cm
Saugzone 200 x 50 cm



3 Schichten mit PE-Folien, Vlies und Flockenzellstoff



350 g Eigengewicht



Tragfähigkeit bis 180 kg



Aufnahmevolumen bis zu 3,5 Liter






Blau-Weiss



nicht steril



Einzeln verpackt

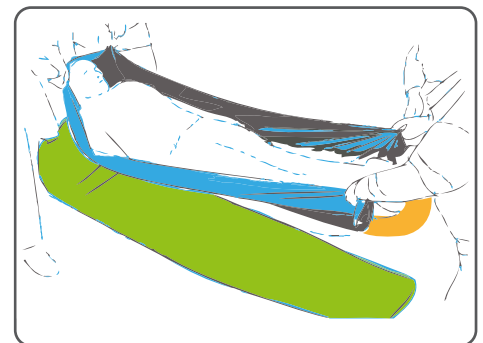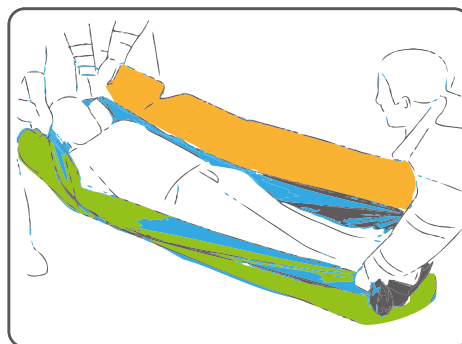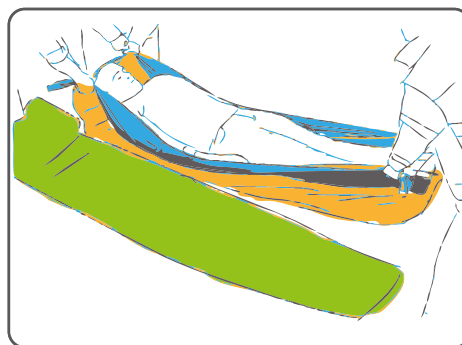

HERZmed
Alles auf einen Schlag!



[http://www](http://www.bexamed.de) Produktausblick: Herzmed OP- Abdecktuch mit Saugfunktion Art.-Nr.: V100038

PE_V100028_HM_Umbettlaken_PROFI_082017-V1.0

Ihr Handelspartner vor Ort:



Vertrieb durch:



BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de



Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungen unter: **0911/97 11 98 - 0.**