


Umbettlaken PROFI

Modell 2020

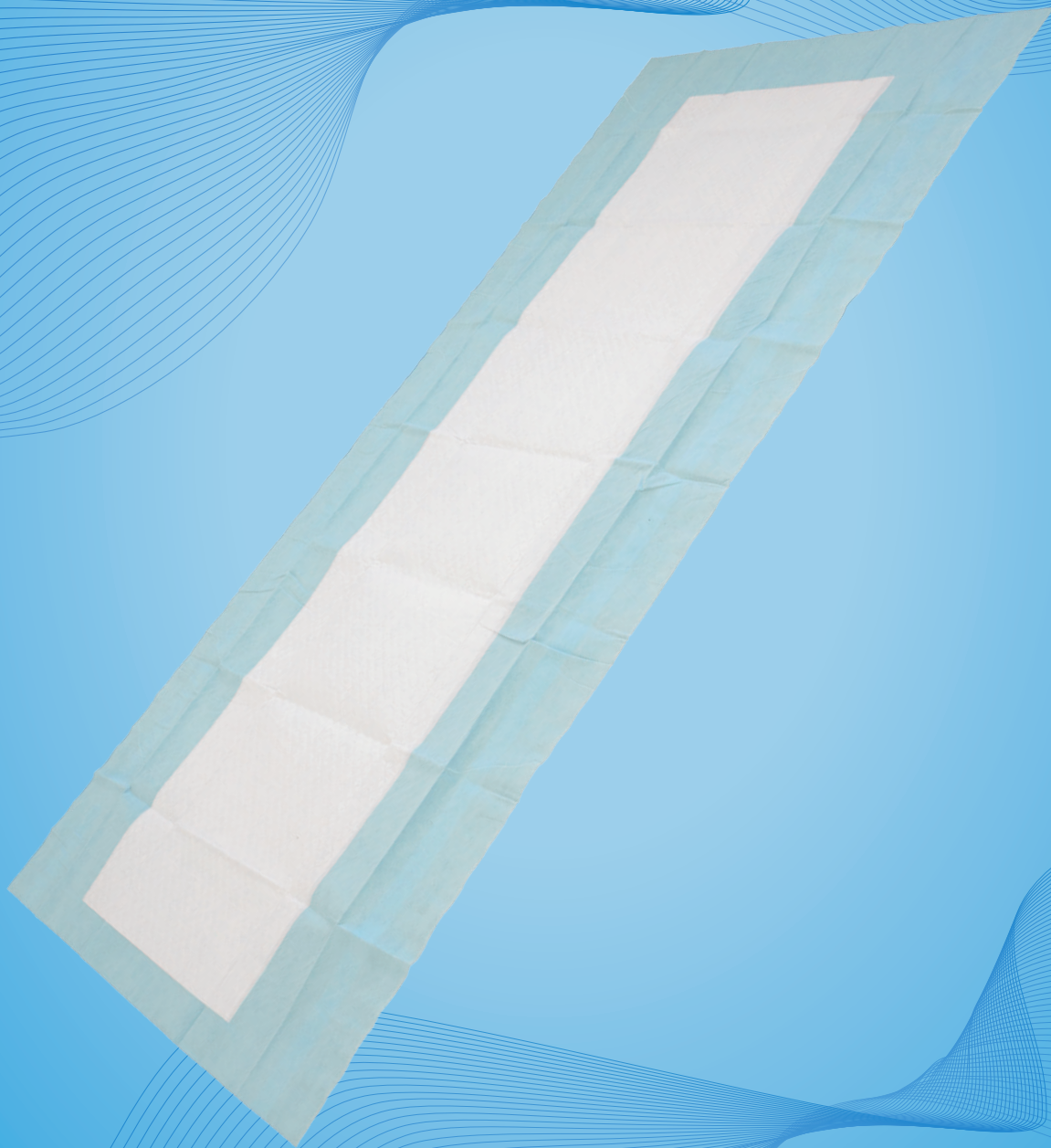

Extrem belastbar und sicher

Unser innovatives HERZmed Umbettlaken PROFI ist ein wasserundurchlässiges Einweglaken zum Umbetten von Patienten für den Einsatz im Rettungsdienst sowie im Klinik- und Pflegebereich.

Das Laken ist extrem robust, auch nach der Absorbierung von Flüssigkeit. Durch die integrierte, leistungsstarke Saugzone (drei Schichten bestehend aus PE-Folien, Flockenzellstoff und Vlies) wird ungewollte Staunässe vermieden – zum Vorteil des Patienten und der Einrichtung.

Detailansichten



Saugzone



Rückseite



Einzelverpackung



Highlights

DREI-SCHICHT-SYSTEM:

- 1. PE-Folie: Dieses Material verhindert ein Durchdringen von Flüssigkeiten. Durch die angeraute blaue Seite wird ein verrutschen des Tuchs verhindert.
- 2. Flockenzellstoff: Durch die besondere rautenförmige Anordnung wird die austretende Flüssigkeit schnell im Saugkörper verteilt.
- 3. Vlies: Die Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen Vliesgewebe. Die Vliesschicht bildet eine komfortable Patientenauflage mit angenehmer Haptik.

Extrem belastbar

Das Umbettlaken hat eine Tragfähigkeit bis zu 200 kg.

Hohe Flüssigkeitsabsorption

Das Umbettlaken hat ein Absorptionsvolumen bis zu 5 Liter.

Kostenoptimierung

Durch das platzsparende Verpackungsdesign nimmt das Umbettlaken wenig Lagervolumen ein.

Einzelverpackung

Die Einzelverpackung ermöglicht gute Lagerung, leichte und sichere Handhabung sowie ein hygienisches Arbeiten.

Oberseite aus Vlies

Die Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen Vliesgewebe. Die Vliesschicht bildet eine komfortable Patientenauflage mit angenehmer Haptik.

Flockenzellstoff


Der rautenförmige Flockenzellstoff sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der austretenden Flüssigkeit.

Unterseite aus PE-Folie

Dieses Material verhindert ein Durchdringen von Flüssigkeiten und ist gleichzeitig für die hohe Traglast des Tuchs verantwortlich. Durch die angeraute blaue Seite wird ein Verutschen des Tuchs verhindert und unterstützt den Verwender somit aktiv bei seiner Arbeit.

Drei-Schicht-System

Das Zusammenspiel der drei unterschiedlichen Schichten sorgt für eine optimale Funktionsweise.

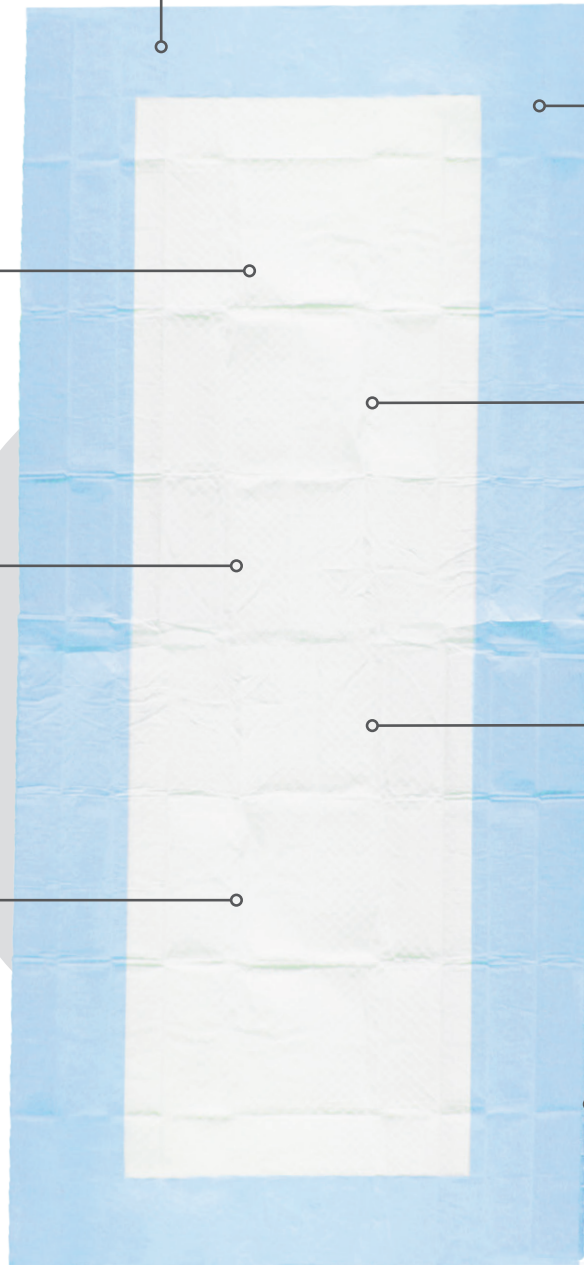

Hygienische Arbeitsumgebung

Durch die großzügigen Abmessungen wird der gesamte Arbeitsbereich sicher abgedeckt und gegen schadhafte Einflüsse durch auftretende Feuchtigkeit effektiv geschützt. Das Umbettlaken PROFI kann sogenannten Kreuz-Infektionen für Patienten und Personal minimieren.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Einwegprodukt!

Technische Spezifikationen

Größe:

Haupttuch: 220 x 110 cm (L x B)
Saugzone: 200 x 50 cm (L x B)

Gewicht:

Ca. 350 g

Farbgebung:

Weiß/Blau

Verpackung:

Einzel verpackt

Aufnahmevermögen:

Absorption: Bis zu 5 Liter

Tragfähigkeit:

Bis zu 200 kg
(auch nach Flüssigkeitsabsorption)

Material:

Unterseite: Polyethylen (PE)
Mittlere Schicht: Flockenzellstoff
Patientenaufgabe: Vlies

Sterilität:

Nein

Bestellinformationen

Art.-Nr.**Beschreibung**

V100048

Umbettlaken PROFI, Modell 2020

Bestellung und Beratung durch:



Scan for English version

[herzmed.com/downloads](https://www.herzmed.com/downloads)



HERZmed GmbH

Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Tel.: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 0

Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9

Mail: herzmed@herzmed.de

Web: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

